

Byte av personlig profil

Pumpen kan ha flera olika **Personliga profiler**. Detta så man snabbt och enkelt kan byta när man exempelvis är sjuk.

Märks det att Charlie är mycket hög exempelvis när han är sjuk så går det bra att byta till en profil som ger honom mer insulin. Charlie's profiler är baserade på hans nuvarande kvoter.


[Läs mer om Charlie's kvoter.](#)

Tänk även på att en enkel förkylning inte alltid behöver resultera i ett byte av profil. Vi har märkt att det är främst när han får feber som han kan behöva byta till en profil med 20% eller t.o.m. 30% extra insulin.

Tänk på att personliga profiler kan behöva skiftas mellan flera gånger på en dag vid t.ex. sjukdom.

Byte av profil

1. Lås upp pumpen och gå in i [INSTÄLLNINGAR]

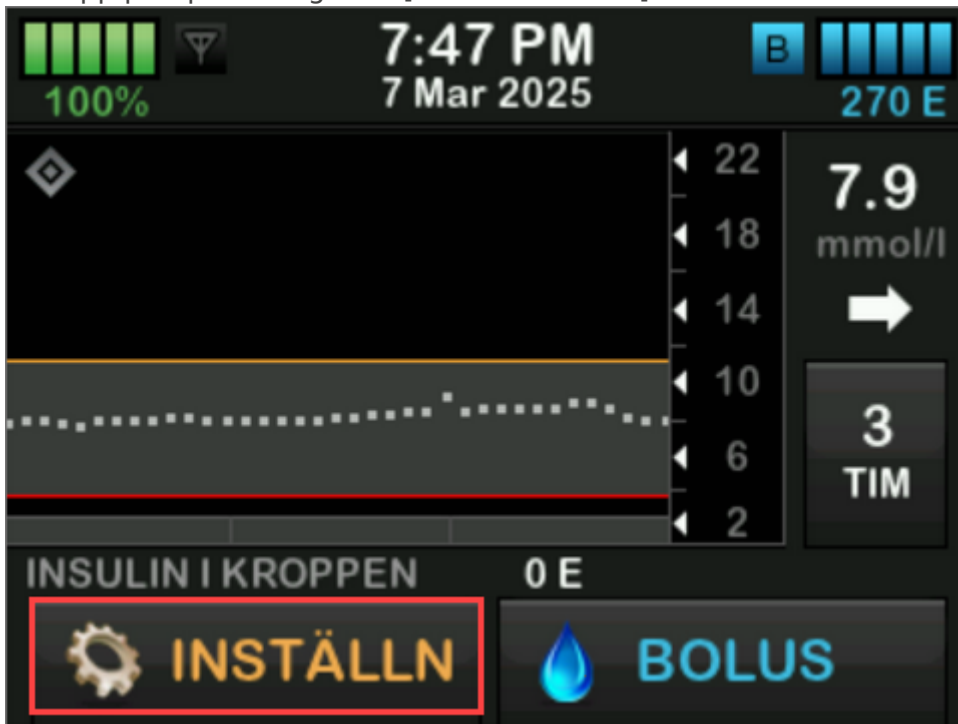

2. Tryck på [Min pump]. Tänk på att det är skillnad på **Aktivetsprofiler** och **Personliga profiler**.



3. Tryck på [Personliga profiler]




4. På bilden nedan kan man se att profilen "Tdd10" är PÅ.
Tryck på den profil som skall aktiveras, exempelvis "Tdd10 plus 20".



5. Tryck på knappen [Aktivera] där att byta till profilen "Tdd10 plus 20":



6. Nedan ruta kommer dyka upp, tryck på blå bock för att godkänna:

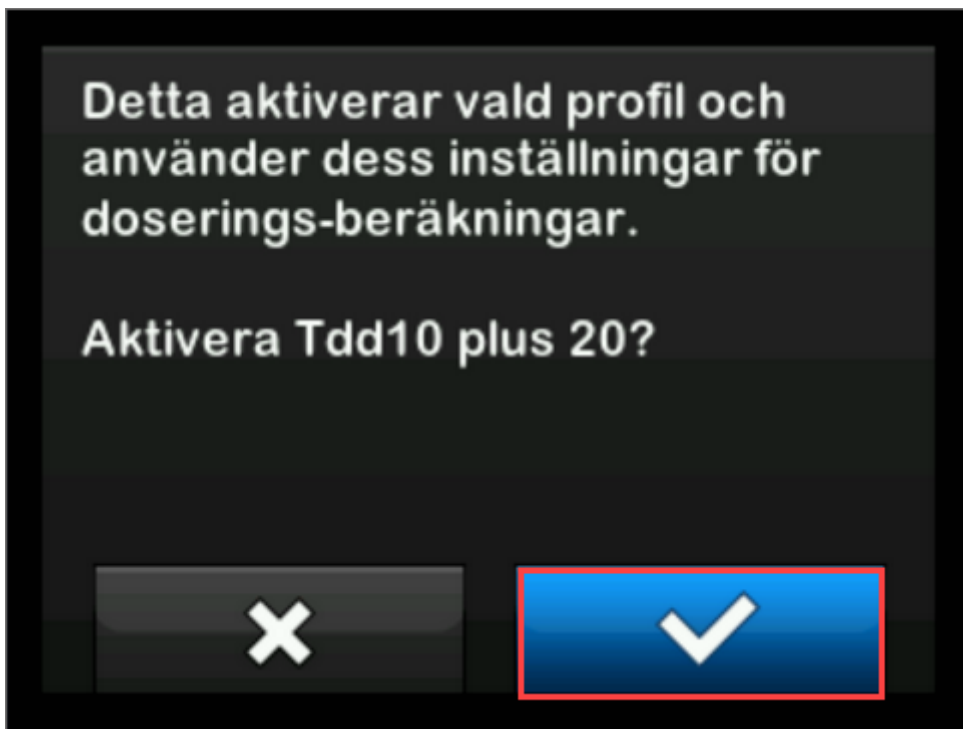

7. Ett meddelande att profilen är aktiverad kommer visas några sekunder:



8. Nu ser vi istället för att profilen "Tdd10 plus 20" är aktiverad:




9. Gå tillbaka till hemskärmen genom att trycka på "T" till höger om skrämen:




Se vilken profil som är aktiv

1. Lås upp pumpen och tryck längst upp till höger.
Dvs på de blåa "bar:sen" som visar antal enheter som är kvar i pumpens reservoar:

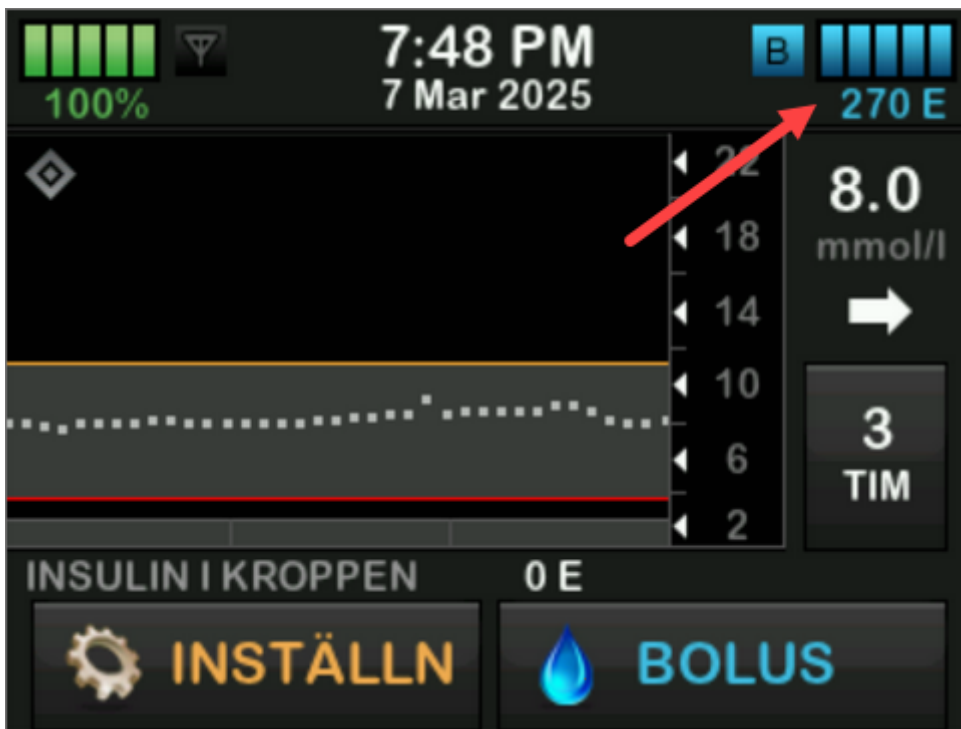

2. Här visas längst upp att just nu är profilen "Tdd10" aktiverad:
 Man kan samtidigt se vilket Basalvärde som används, och mycket mer.
 Tänk på att Basalvärdet är olika beroende på timmen, se nedan:

Värden i Tdd10-profilen

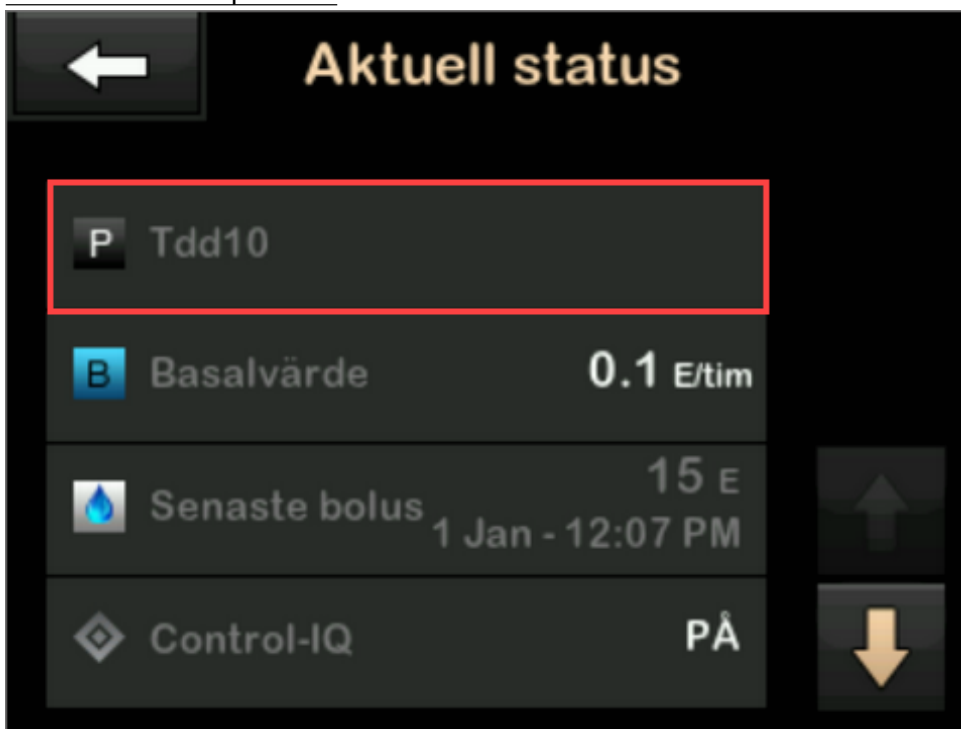

3. Tryck på pil ner (längst ner till höger). Då kommer fler värden visas.
 Exempel på detta är nuvarande ISF, KH-KVOT och BG-MÅL (alltid 6.1).

Läs mer om dessa förkortningar

 **Aktuell status**

 ISF	1E: 12.0 mmol/l	
 KH-kvot	1E: 37 g	
 BG-mål	6.1 mmol/l	
 Insulinduration	5 tim	

Revision #11

Created 8 March 2025 02:04:25 by Lars

Updated 7 April 2025 22:02:52 by Lars